



è un marchio distribuito in esclusiva da
KARMA ITALIANA srl

LD III

Rimuovi calli

Manuale di istruzioni

www.karmaitaliana.it



IMPORTANTE PRIMA DELL'USO

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

Utilizzare solo 2 batterie AA da 1,5 V.

Prima di utilizzare per la prima volta, rimuovere con cura il dispositivo dalla sua confezione; rimuovere le pellicole protettive (si prega di rispettare l'ambiente).

Non immergere il dispositivo ad eccezione delle parti rimovibili in acqua o altri liquidi e assicurarsi che le parti elettriche (motore) rimangano asciutte.

Pulire accuratamente il dispositivo e gli accessori con un panno asciutto prima dell'uso.

Un uso improprio del prodotto può danneggiare o ferire l'utente. In caso di uso improprio, PEM declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni esterni dovuti a un uso improprio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate all'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.

2. I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con l'apparecchio. L'uso e la supervisione sono a carico del responsabile.

3. Questo dispositivo è progettato per rimuovere vari calli dalla pelle dei piedi, dei talloni o di altre parti dei piedi. Non può essere utilizzato in nessun caso su altre parti del corpo.

4. L'uso di questo dispositivo è personale, non prestarlo ad altre persone.

5. Questo prodotto è consigliato per pelli normali, in caso di allergie o problemi cutanei, consultare il proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di diabete o malattie dermatologiche, contattare il medico prima di qualsiasi utilizzo.

6. Avvertenza: non lasciare mai che il dispositivo agisca nella stessa area per più di 2 o 3 secondi, evitare una pressione eccessiva per evitare lesioni.

7. In caso di vesciche, infiammazioni o irritazioni,

ferite aperte, cicatrici, evitare di trattare l'area interessata del piede.

8. **NON UTILIZZARE MAI** il dispositivo su verruche o ferite della pelle.

9. Questo apparecchio è destinato **ESCLUSIVAMENTE** all'uso domestico.

10. Conservare il dispositivo al riparo dalla luce solare diretta e in un luogo asciutto.

11. **NON ACCENDERE MAI** il dispositivo se la testina esfoliante non è attaccata o manca.


12. A causa della sua rotazione, fare attenzione a non mettere il dispositivo a contatto con capelli, lacci o qualsiasi altro oggetto o parte di un oggetto o del corpo che potrebbe entrare all'interno e avvolgere il sistema di rotazione. **NON inserire MAI** alcun oggetto all'interno del rullo per piedi.

13. Dopo l'uso, rimettere sempre il coperchio di protezione sulla testina.

14. Non utilizzare mai questo dispositivo su bambini, persone disabili o insensibili, addormentate o prive di conoscenza. In caso di cattiva circolazione sanguigna, problemi di guarigione, coagulazione, ecc. Contattare il medico prima di qualsiasi utilizzo.

15. Non fare utilizzare questo apparecchio da altre persone, non smontarlo mai. In caso di disagio o dolore, consultare direttamente il medico.

DESCRIZIONE

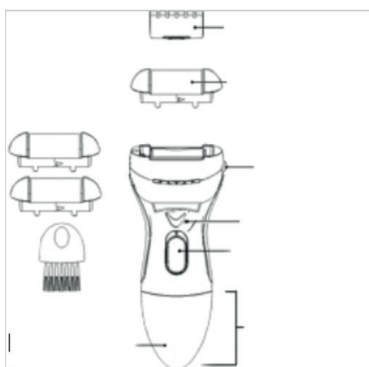

Il dispositivo è fornito con 3 diverse testine esfolianti. Per la loro sostituzione:

Spegnere il dispositivo, quindi premere il pulsante di rilascio sul lato del dispositivo. Rimuovere la testina, pulire con lo spazzolino e sostituire con la nuova testina inserendola nella stessa direzione. Verificare che sia ben posizionata. Se udite un "clic" significa che è stata inserita correttamente. NON azionare MAI il dispositivo senza una testina.

Una volta montata la testina potete procedere con l'utilizzo:

Il dispositivo deve essere usato esclusivamente per calli, duroni ecc ... su piedi e talloni.

Prima di iniziare il trattamento, assicuratevi di risciacquare e pulire l'area da trattare.

Rimuovere la protezione e accendere il dispositivo (I/ON): il LED di funzionamento si avvierà contemporaneamente alla rotazione della testina esfoliante.

Posizionare la testina del dispositivo sulla zona da trattare. Grazie al suo LED visualizzerete meglio l'area da trattare.

Iniziate premendo delicatamente e aumentando gradualmente la pressione. Per sicurezza, se la pressione esercitata è eccessiva, il dispositivo si spegnerà da solo.

Passate avanti e indietro la testina sul tallone con un movimento a 90° di 2-3 secondi. Ripetete il movimento fino a quando il callo o il durone sarà levigato o scomparso. Una volta ottenuto il risultato desiderato, posizionare il pulsante in posizione O/OFF (in basso).

Pulite la parte ruvida della testina esfoliante utilizzando lo spazzolino fornito nella confezione. Dopo la pulizia, rimettere il coperchio di protezione sulla testina.

OGNI INTERVENTO deve essere effettuato con l'apparecchio in posizione O/OFF.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Controllare e pulire la testina e il rullo dopo ogni utilizzo.

Per fare ciò, utilizzare lo spazzolino in dotazione.

Come consigliato sopra, non pulire MAI l'apparecchio mentre è in funzione.

Se avete difficoltà a pulire la testina, staccatela dal dispositivo e sciacquatela sotto l'acqua corrente. NON immergere MAI il rullo / la testina esfoliante in acqua.

Asciugare la testina e rimetterla sul dispositivo con la sua custodia protettiva

L'APPARECCHIO È PROGETTATO PER RESISTERE A SCHIZZI MA NON È IMPERMEABILE, non immergere mai la parte motrice.

CONSIGLI

Tenere sempre il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e in un luogo asciutto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini il dispositivo e i suoi componenti.

Non inserire batterie che non corrispondono alle dimensioni, alla potenza o all'ampereaggio descritti.

Cambiare sempre le batterie in coppia.

Tenere lontano dalle fonti di calore.

Smaltire le batterie presso un punto di riciclaggio previsto a tale scopo.

DATI TECNICI

Voltaggio: 1,5 V - 2xAA

Potenza LD-111: 3 W

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito www.karmaitaliana.it

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno.

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non appropriato dell'apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora l'apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a carico del proprietario dell'apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata unicamente dalla presentazione della fattura o scontrino d'acquisto.

KARMA®

Distribuito in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL

Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1



Questo simbolo vi avverte della presenza di materiale non isolato "sotto tensione" ad elevato voltaggio, all'interno del prodotto, che può costituire pericolo di folgorazione per le persone.



Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d'uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il prodotto



Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili.



Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - " Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative

alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.